Dispositif de contrôle de qualité pour un analyseur sanguin fonctionnant en sang total

5

20

25

30

35

L'invention se rapporte aux analyseurs hématologique destinés à analyser automatiquement des échantillons de produits sanguins.

10 Elle concerne plus particulièrement un dispositif de contrôle de qualité pour un analyseur sanguin fonctionnant en sang total.

Dans ce qui suit, on entend par "analyseur" tout appareil capable d'effectuer des analyses à partir d'un tube de sang, de sérum, de plasma ou d'urine.

Par l'expression "analyseur sur sang total" on entend un analyseur effectuant des analyses sur du sang total, c'est à dire contenant tous les éléments du sang, en opposition avec les analyseurs fonctionnant sur plasma ou sérum.

Par l'expression "contrôle de qualité" on entend une procédure qui consiste à vérifier au minimum quotidiennement le bon fonctionnement de l'analyseur avant d'effectuer les examens des patients.

Par l'expression "sang de contrôle bas, haut ou normal" on entend un sang dont les valeurs sont choisies pour être plutôt faibles, élevées ou normales.

Les sangs de contrôle destinés aux analyseurs se présentent généralement dans un conditionnement de type "flacons" ou "tubes" et sont proposés avec des valeurs basses, normales et hautes afin de contrôler l'instrument sur l'ensemble de sa gamme de mesure.

2

Les règles de passage des sangs de contrôle dépendent des législations. Généralement il est nécessaire de passer au moins une fois par jour le niveau normal, plus un niveau bas ou haut. Dans certains cas, et notamment pour les appareils fonctionnant jour et nuit, il est nécessaire de passer au moins une fois le niveau normal au changement d'opérateur.

Si l'on se réfère à la norme NCCLS H38-P paragraphe 5.7.2, les auteurs font référence à l'importance majeure de l'agitation dans la méthode de contrôle de qualité, notamment concernant le temps d'agitation et la manière d'agiter les sangs de contrôle. Les recommandations officielles montrent qu'une meilleure maîtrise des outils pré-analytiques est très importante pour la pertinence du contrôle de qualité.

15

20

25

30

5

La conservation des sangs de contrôle se fait par le froid à la température recommandée par le fournisseur afin de garantir la date limite de péremption donnée par le fournisseur. Il doivent avoir repris la température ambiante et être soigneusement mélangés avant d'être passés sur l'analyseur. La remise en température est un facteur important dans le bon fonctionnement du contrôle de qualité.

Les sangs de contrôle sont livrés avec des feuilles de résultats donnant, pour chaque niveau de sang et pour chaque paramètre, la valeur cible à obtenir et les limites acceptables ou tolérances.

La date de péremption ainsi que le nombre maximum de prélèvements dans le même tube de sang de contrôle sont également donnés par le fabricant et doivent être soigneusement respectés.

Les résultats obtenus en analysant les sangs de contrôle doivent être archivés par le laboratoire. Ils sont souvent

3

présentés sous la forme de graphes dits de "levey jennings" afin d'en faciliter l'interprétation.

La procédure de passage des sangs de contrôle dans un laboratoire consiste à mettre en route l'analyseur si nécessaire, à sortir les sangs de contrôle d'un réfrigérateur, à laisser les sangs sur une paillasse pendant quelques minutes pour qu'ils prennent la température ambiante, à agiter très soigneusement les sangs de contrôle, à effectuer les passages des sangs dans l'analyseur, à vérifier si les résultats sont dans les limites données par le fabricant et à remettre les sangs au réfrigérateur.

5

10

20

25

30

35

Dans ce processus il faut vérifier à chaque fois la date de péremption et respecter le nombre maximum d'utilisation successives du même tube ou flacon.

La même procédure est nécessaire pour l'utilisation d'un appareil fonctionnant jour et nuit dans un service d'urgence ou de soins intensifs ou encore dans le cadre de l'officine d'un médecin installé hors de l'hôpital obligeant l'opérateur à sortir les sangs du réfrigérateur et à effectuer l'ensemble de la procédure décrite ci dessus. Dans le cadre des utilisations ci-dessus les opérateurs sont souvent peu qualifiés et formés pour reproduire les procédures de contrôle réglementaires nécessaires au contrôle de l'analyseur.

Une phase importante de la procédure de contrôle de qualité est la remise en suspension du contrôle de qualité qui nécessite des dispositifs conçus pour effectuer une agitation régulière et non agressive des flacons.

On connaît en particulier, d'après US 2002/0118594A1, un dispositif d'agitation comportant un électro-aimant et une petite tige contenue dans le flacon. Le mouvement de l'électro-

4

aimant fait bouger la tige contenue dans le flacon et provoque l'agitation sous la forme d'un vortex du sang à l'intérieur du flacon. Outre le fait que ce dispositif nécessite d'effectuer des opérations manuelles pour pouvoir être intégré dans une procédure de contrôle de qualité, le principe d'agitation qu'il met en oeuvre présente un certain nombre de risques vis-à-vis des cellules qui peuvent être détériorées lors de l'agitation.

On connaît aussi, d'après WO 08501797A1, un dispositif d'agitation par balancement qui équipe notamment les appareils automatiques de la société Beckman Coulter. Dans ce dispositif des cassettes contenant les tubes de contrôle sont chargées horizontalement sur un tapis roulant animé d'un mouvement de balancement qui permet l'agitation du sang.

15

20

25

10

5

On connaît également, d'après US 5 110 743 un dispositif d'agitation par retournement constitué d'un disque pouvant accueillir des tubes. Le disque est composé de deux sous-ensembles pouvant entrer en rotation indépendamment l'un de l'autre. Un disque est utilisé pour l'agitation et l'autre pour le stockage.

Les procédés d'agitation par balancement et par retournement peuvent être retenues comme principe d'agitation pour le contrôle de qualité. En aucun cas les brevets cités ci-dessus ne décrivent l'utilisation de ces principes d'agitation pour une fonction de contrôle de qualité intégrée telle que décrite dans la présente demande.

De nombreux brevets décrivent la composition de contrôle de qualité et mettent en avant des qualités de stabilité et de paramètres contrôlables. C'est le cas par exemple des brevets US 5 529 933, US 6 403 377, US 6 448 085. Cependant, aucun de ces brevets ne décrit de méthode d'agitation ou de procédure de passage des tubes de contrôle de qualité permettant de

5

reproduire de manière optimum l'agitation et la conservation des échantillons du contrôle de qualité dans l'analyseur.

Etant donné l'importance du contrôle de qualité tant au plan législatif qu'au plan de la garantie de la qualité des analyses rendues aux patients, un des buts de l'invention est d'intégrer le contrôle de qualité dans les analyseurs et de l'automatiser totalement pour éliminer les erreurs liées aux manipulations.

5

35

10 En étant totalement affranchi du contrôle de qualité, l'opérateur peut consacrer toute son attention aux résultats des patients.

La procédure de contrôle de qualité peut ainsi être prise en charge par l'analyseur qui l'exécute de manière automatique, seuls la fréquence des contrôles de qualité ainsi que le nombre et le choix des niveaux de sangs de contrôle étant programmables par l'opérateur.

20 Ce but est atteint par l'invention en proposant un dispositif de contrôle de qualité automatique intégré dans un analyseur sanguin fonctionnant en sang total.

Pour effectuer un contrôle de qualité permettant de vérifier le 25 fonctionnement de l'analyseur le dispositif conservation l'invention comprend des moyens de refroidissement des sangs de contrôle, des moyens de remise en température des sangs de contrôle à la température prescrite par le fabricant des sangs de contrôle, des moyens d'agitation pour la remise en suspension des cellules et des moyens de 30 prélèvement du sang ainsi préparé.

Selon une première caractéristique, les moyens de conservation du sang de contrôle comprennent un nombre déterminé de tubes fermés par un bouchon et rangés dans un support en contact avec

6

un bloc de refroidissement permettant de réguler la température et de maintenir une température optimum pour la conservation du sang de contrôle.

- Dans l'invention, le refroidissement des sangs de contrôle et leur remise en température constituent des opérations essentielles pour accomplir le contrôle de qualité dans des conditions optimales.
- De façon avantageuse le bloc de refroidissement est un bloc de refroidissement à effet Peltier qui permet de contrôler la température du bloc à l'aide de moyens de régulation électronique. On rappellera qu'un tel bloc est alimenté en courant électrique et permet une régulation précise de la température. Il est en outre peu encombrant, ce qui facilite son intégration dans un analyseur.

Cependant l'invention ne se limite pas à l'utilisation d'un bloc de refroidissement à effet Peltier et d'autres types de bloc de refroidissement sont envisageables dans le cadre de l'invention.

Pour la remise en température, différentes solutions sont proposées.

25

20

Tout d'abord, et quel que soit le type de bloc de refroidissement utilisé, le support de tubes peut être désolidarisé du bloc de refroidissement pour la remise en température des sangs de contrôle.

30

35

Dans le cas d'un bloc de refroidissement à effet Peltier, le courant alimentant le bloc de refroidissement à effet Peltier peut être coupé pendant une période de temps déterminée afin de remettre en température les sangs de contrôle. L'arrêt du courant provoque une remontée de la température du bloc de

7

refroidissement à la valeur ambiante.

Toujours dans le cas d'un bloc de refroidissement à effet Peltier, une autre solution consiste à commander pour remettre et maintenir le contrôle de qualité à sa température d'utilisation selon les spécifications du fabricant. On utilise alors l'effet Peltier en sens inverse pour provoquer un réchauffement, au lieu d'un refroidissement.

10 Les moyens d'agitation sont de préférence des moyens d'agitation par balancement et/ou retournement formés par le support de tubes, articulé autour d'une charnière du bloc de refroidissement. De préférence l'angle de retournement est compris entre 100° et 180°.

15

5

Selon une deuxième caractéristique, les moyens de prélèvement du sang sont formés par une aiguille propre à aspirer le sang dans les tubes. L'aiguille est animée d'un mouvement transversal au dessus des tubes de sang à analyser et des sangs de contrôle ainsi qu'au dessus de cuves de rinçage et de mélange et d'un mouvement vertical pour pénétrer dans les tubes par perçage des bouchons ou de descendre dans les cuves de rinçage et de mélange pour effectuer les rinçages ou les dilutions du sang.

25

30

35

20

Le perçage des bouchons s'effectue lorsque les tubes sur leur support sont en position haute et/ou basse.

Le dispositif comprend avantageusement des moyens de traitement programmables pour vérifier que les valeurs obtenues en passant chaque contrôle de qualité correspondent aux valeurs limites et attendues du sang de contrôle.

Les moyens de traitement déclenchent une alarme si les valeurs obtenues lors du passage du contrôle de qualité sont en dehors

8

des limites attendues.

5

15

20

30

Le dispositif comprend en outre des moyens pour déclencher la procédure de contrôle de qualité soit directement par un opérateur ou de manière automatique ou par une connexion externe vers un organe de commande.

Le transfert et l'analyse des données s'effectuent par l'intermédiaire d'un réseau interne ou externe mettant en oeuvre les normes en vigueur, parmi lesquelles on peut citer HL7, ASTM et XML.

Les tubes comportent de préférence des moyens d'identification et de suivi par code barres, par puces électronique et/ou étiquette magnétique.

L'application du dispositif selon l'invention aux analyseurs sur sang total est nouvelle. Elle requiert l'intégration de moyens de conservation des sangs de contrôle, de mélange et de prélèvement de l'échantillon dans l'analyseur.

Sous un autre aspect, l'invention concerne un analyseur sanguin comprenant un dispositif tel que défini ci-dessus.

- 25 Dans la description qui suit, faite seulement à titre d'exemple on se réfère aux dessins annexés, sur lesquels:
 - la figure 1 est une vue en perspective d'un support de tubes en contact avec un bloc de refroidissement selon l'invention;
 - la figure 2 est une vue illustrant de déplacement du support des tubes de la figure 1 dans leur mouvement d'agitation;
- les figures 3A et 3B sont respectivement des vues en perspective et de face d'un dispositif de contrôle de qualité

9

intégré dans un analyseur fonctionnant en sang total selon l'invention;

 la figure 4 est un schéma illustrant les modes de 5 fonctionnement du dispositif de contrôle de qualité selon l'invention; et

- la figure 5 est un schéma illustrant sous la forme d'un organigramme le processus d'interprétation et de validation des résultats mis en oeuvre par le dispositif selon l'invention.

Le support de tubes en forme de parallélépipède rectangle, représenté avec la référence 1 sur la figure 1, comporte trois logements cylindriques d'axes longitudinaux parallèles entre eux dans lesquels sont rangés trois tubes de sangs de contrôle 2, 3, 4 fermés par des bouchons 2a, 3a, 4a. Les tubes 2, 3, 4 renfermant des sangs de contrôle, sont réfrigérés au travers du support 2 par un bloc de refroidissement 5. Les sangs contenus dans les tubes 2, 3, 4 peuvent correspondre aux niveaux bas, normal et haut de contrôle mais on peut imaginer qu'il y ait deux ou trois niveaux identiques ou que l'on utilise qu'un seul niveau.

Le bloc de refroidissement 5 en forme de parallélépipède rectangle est en contact étroit par une de ses faces 5a avec une face la en regard du support de tubes 1 lorsque le contrôle de qualité n'est pas utilisé, c'est à dire dans les conditions de repos, pour conserver les sangs à la température recommandée par le fournisseur.

30

35

10

15

20

25

De façon avantageuse, le bloc 5 peut être un bloc de refroidissement fonctionnant suivant le principe de l'effet Peltier qui permet de contrôler la température du bloc à l'aide de moyens de régulation électronique non représentés, le réchauffage des tubes ayant lieu par exemple en coupant le

10

courant traversant le bloc de refroidissement. Cependant tout autre procédé de refroidissement peut également être utilisé. Ainsi il est possible aussi d'utiliser l'effet Peltier en sens inverse pour provoquer le réchauffage des tubes et donc la remise en température des sangs de contrôle.

Le support de tubes 1 est réalisé dans un métal ou tout autre matière conductrice de la température de façon à ce qu'il puisse rapidement prendre la température du bloc de refroidissement et donc réguler la température des sangs de contrôle à la même température que celle du bloc de refroidissement.

Comme le montre la figure 2, où les éléments homologues à ceux de la figure 1 sont représentés avec les mêmes références, l'agitation du sang est effectuée par retournement répété des tubes 2, 3, 4 autour d'une charnière 12, disposée sensiblement à l'horizontale, depuis une position haute pour laquelle les tubes sont orientés verticalement avec les bouchons 2a, 3a, 4a au dessus jusqu'à une position basse pour laquelle les tubes de sang 2, 3, 4 sont orientés verticalement mais présentent leurs bouchons 2a, 3a, 4a, vers le bas et vice versa. L'angle α de retournement peut être quelconque et compris par exemple entre 100' et 180'. Les moyens mécaniques permettant d'effectuer ce mouvement sont à la portée de l'homme de métier et ne sont pas représentés. Le mouvement alternatif représenté par la double flèche 6 est répété plusieurs fois afin d'obtenir une agitation du sang conforme aux spécifications données par le fournisseur des sangs de contrôle.

30

35

25

5

10

15

20

Dans cette réalisation préférentielle, on voit qu'il est possible d'effectuer le prélèvement du sang avec le tube en position haute par des moyens de prélèvement symbolisés par une aiguille 8 ou avec le tube en position basse par des moyens de prélèvement symbolisés par une aiguille 7.

11

On voit également que l'on peut obtenir une remise en température rapide des sangs de contrôle en désolidarisant le support de tube l du bloc de refroidissement 5 par une rotation de l'angle α autour de la charnière 12. Cette solution peut s'appliquer aussi à des blocs de refroidissement qui ne fonctionnent pas par effet Peltier.

5

10

25

30

35

On se réfère maintenant aux figures 3A et 3B qui représentent un exemple d'intégration d'un dispositif de contrôle de qualité dans un instrument d'analyse sur sang total 9. L'exemple se rapporte à un compteur de cellules du type de celui décrit par exemple dans le brevet FR 97 13503 déposé au nom de la société Demanderesse.

15 Le dispositif de contrôle comprend un bloc support de tubes 1 en contact avec un bloc de refroidissement à effet Peltier 2, une aiguille de prélèvement 7, et un bloc de comptage 10 comportant des cuves de mélange et de rinçage (non représentées). On voit également sur les figures 3A et 3B le 20 bloc d'alimentation électrique de l'instrument d'analyse 9.

Le bloc support de tubes 1 est entraîné en rotation par l'axe charnière 12 qui est couplé à un moteur 13 par l'intermédiaire d'un réducteur formé par une poulie d'entraînement 14 solidaire de l'axe du moteur 13 et par une poulie menée 16 solidaire de l'axe charnière 12, la poulie menée 16 étant entraînée par la poulie d'entraînement 14 par l'intermédiaire d'une courroie 17.

L'aiguille de prélèvement 7 est solidaire d'un chariot 18 mobile en translation sur deux rails 19 qui lui permettent de se déplacer d'un mouvement horizontal symbolisé par la double flèche 20, successivement au dessus du sang de patients à analyser, des sangs de contrôle contenus dans les tubes 4, 5, 6, puis du bloc de comptage 10 comportant des cuves de mélange et de rinçage. Le déplacement du chariot 18 peut être assuré

12

par tout moyen connu non représenté, tel que par exemple un moteur électrique de type pas à pas, intégré au chariot 18 commandé par un microprocesseur.

- L'aiguille de prélèvement 7 est également animée d'un mouvement vertical symbolisé par la double flèche 21 qui lui permet de descendre dans les tubes 2, 3, 4 afin d'effectuer le prélèvement du sang ou de descendre dans le bloc de comptage 10 comportant des cuves de mélange et de rinçage 10 pour effectuer des rinçages ou des dilutions de sang. Le déplacement de l'aiguille 7 peut être assuré par un moteur électrique de type pas à pas, non représenté, couplé par exemple à une crémaillère supportant l'aiguille 7.
- Une porte d'accès non représentée permet le remplacement des tubes de contrôle lorsque ceux-ci sont vides ou atteignent la date de péremption.
- La disposition des tubes de sang de contrôle n'est pas limitée à la seule représentation des figures 3A et 3B dans lesquelles les moyens d'agitation représentés ne sont donnés qu'à titre d'exemple. On pourra également utiliser des moyens d'agitation par Vortex à faible vitesse, balancement et/ou retournement des types précités dans l'art antérieur en leur adaptant des moyens de refroidissement nécessaires à la conservation et à la remise en température des tubes.

Les moyens de prélèvement peuvent nécessiter d'avoir un prélèvement fonctionnant avec le tube retourné, c'est à dire avec le bouchon en position basse. C'est souvent le cas avec les analyseurs utilisant une vanne d'échantillonnage. La rotation de l'ensemble des contrôles de qualité dans l'agitateur permet les deux configurations de perçage, le perçage pouvant être réalisé par le mouvement de l'aiguille 7 vers le contrôle de qualité ou par le mouvement d'une partie ou

30

35

13

de la totalité de l'appareillage lié au contrôle de qualité vers l'aiguille 7.

5

10

15

20

25

30

35

Comme on peut le voir sur la figure 4, le lancement du contrôle de qualité peut être effectué de trois façons différentes. Il peut être lancé soit par un opérateur, soit automatiquement à l'aide d'un automate programmable 22 suivant une programmation qui permet par exemple de lancer le contrôle de qualité le matin ou pendant la nuit, soit encore par une console 23 via un réseau Intranet ou Internet 24 mettant en oeuvre par exemple les technologies de réseau connues sous les désignations HL7, ASTM et XML afin de permettre à un laboratoire centrale dont dépend l'analyseur sang total, de lancer la procédure de contrôle de qualité. Ces trois modes de lancement sont gérés par l'intermédiaire d'un module 25 qui permet le déclenchement du mode contrôle de qualité.

33 L'algorithme représenté par les étapes 26 à de l'organigramme de la figure 5 permet l'interprétation et la validation des résultats et la génération d'alarmes au cas où le contrôle de qualité est défaillant. La procédure commence à l'étape 26 par le lancement de la séquence de contrôle, ce qui implique la remise en température et l'agitation du contrôle de qualité. L'étape suivante 27 représente l'étape de mesure et d'analyse. A l'étape 28 une comparaison est effectuée entre les résultats de l'analyse et les valeurs attendues du contrôle de qualité. Si les résultats ne sont pas corrects, ceux-ci ne sont pas validés et l'étape 29 permet l'enregistrement des l'arrêt temporaire de l'analyseur et le déclenchement d'une alarme à l'étape 30.

Si à l'étape 28 les résultats de l'analyse sont corrects, les résultats sont enregistrés à l'étape 31 et en fonction d'un test effectué sur les moyens de connexion à l'étape 32, les résultats sont envoyés vers un serveur via des fonctions de

14

connexion externe 33.

Dans cette procédure, l'identification et le suivi du sang examiné est réalisé par tout moyen d'identification connu tel que : code barre, puce électronique et/ou étiquette magnétique accompagnant les tubes.

10

15

15

Revendications

1- Dispositif de contrôle de qualité pour un analyseur sanguin (9) fonctionnant en sang total, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de conservation (1, 5) par refroidissement des sangs de contrôle, des moyens (1, 5) de remise en température des sangs de contrôle à la température prescrite par le fabricant des sangs de contrôle, des moyens d'agitation (1, 12, 13, 14, 16, 17) pour la remise en suspension des cellules et des moyens de prélèvement (7) du sang ainsi préparé, ce qui permet d'intégrer le dispositif à l'analyseur sanguin.

2- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que 15 les moyens de conservation (1, 5) des sangs de contrôle comprennent un nombre déterminé de tubes (2, 3, 4) fermés par un bouchon (2a, 3a, 4a) et rangés dans un support (1) en contact avec un bloc de refroidissement (5) permettant de réguler la température et de maintenir une température optimum 20 pour la conservation du sang de contrôle.

3- Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le bloc de refroidissement (5) est un bloc de refroidissement à effet Peltier.

25

5

10

4- Dispositif selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que le support de tubes (1) est désolidarisé du bloc de refroidissement (5) pour la remise en température des sangs de contrôle.

30

5- Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que le courant alimentant le bloc de refroidissement à effet Peltier (5) est coupé pendant une période de temps déterminée pour la remise en température des sangs de contrôle.

16

6- Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que le bloc de refroidissement à effet Peltier (5) est commandé pour remettre et maintenir le contrôle de qualité à sa température d'utilisation selon les spécifications du fabricant.

7- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens d'agitation (1, 12, 13, 14, 16, 17) sont des moyens d'agitation par balancement et/ou retournement formés par le support de tube (1) articulé autour d'une charnière (12) du bloc de refroidissement (2).

8- Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'angle de retournement des moyens de retournement est compris entre 100° et 180°.

9- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens d'agitation sont des moyens d'agitation par Vortex à faible vitesse.

20

15

5

10

10- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que les moyens de prélèvement du sang sont formés par une aiguille (7) propre à aspirer le sang dans les tubes.

25

30

11- Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'aiguille (7) est animée d'un mouvement transversal au dessus des tubes de sang à analyser et des sangs de contrôle (2,3,4) ainsi qu'au dessus d'un bloc de comptage (10) comportant des cuves de mélange et de rinçage et d'un mouvement vertical pour pénétrer dans les tubes par perçage des bouchons ou de descendre dans le bloc de comptage (10) comportant des cuves de mélange et de rinçage pour effectuer les rinçages ou les dilutions du sang.

PCT/FR2004/001767

17

12- Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que le perçage des bouchons (2a, 3a, 4a) s'effectue lorsque les tubes sur leur support (1) sont en position haute ou basse.

5 13- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de traitement programmables (25,...,33) pour vérifier que les valeurs obtenues en passant chaque contrôle de qualité correspondent aux valeurs limites et attendues du sang de contrôle.

10

WO 2005/019835

14- Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que les moyens de traitement déclenchent une alarme (30) si les valeurs obtenues lors du passage du contrôle de qualité sont en dehors des limites attendues.

15

20

25

15- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (23) pour déclencher la procédure de contrôle de qualité soit directement par un opérateur ou de manière automatique (22) ou par une connexion externe vers un module de commande (25).

16- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce le transfert et l'analyse des données s'effectuent par l'intermédiaire d'un réseau interne ou externe mettant en oeuvre les normes en vigueur, parmi lesquelles on peut citer HL7, ASTM et XML.

17- Dispositif selon l'une des revendications 2 à 16, caractérisé en ce que les tubes (2,3,4) comportent des moyens d'identification et de suivi par code barres, par puces électronique et/ou étiquette magnétique.

18- Analyseur sanguin comprenant un dispositif selon l'une des revendications 1 à 17, intégré à l'analyseur.

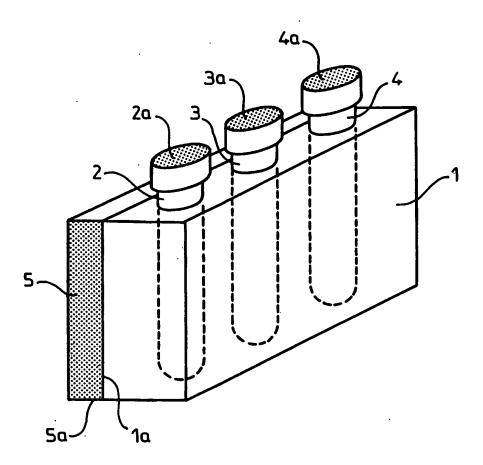


FIG.1

2/4

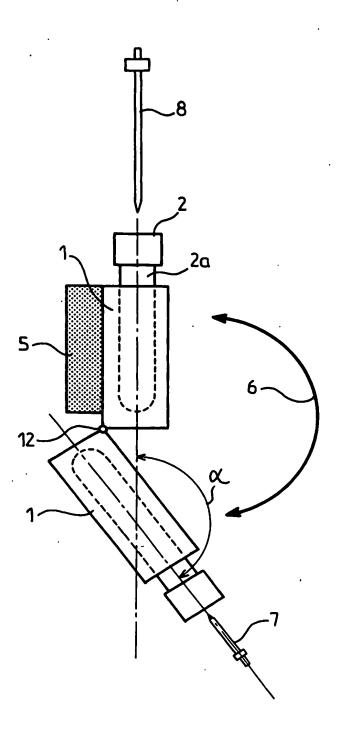


FIG.2

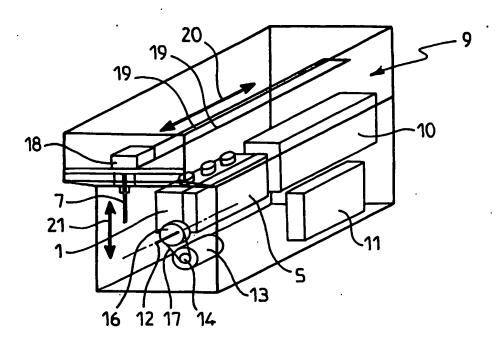


FIG.3A

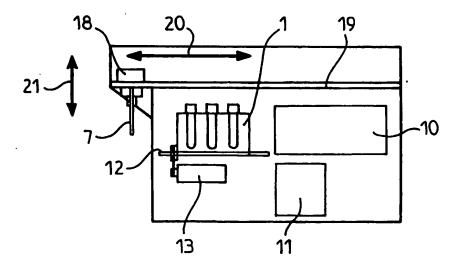


FIG.3B


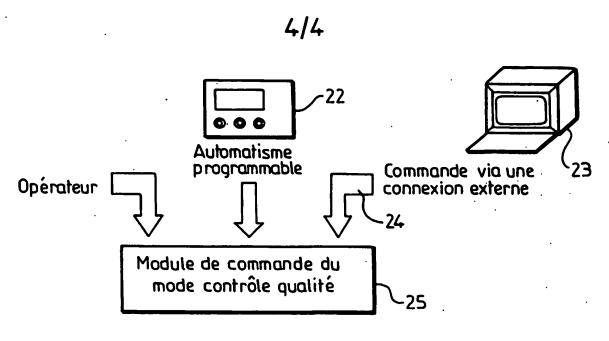


FIG.4

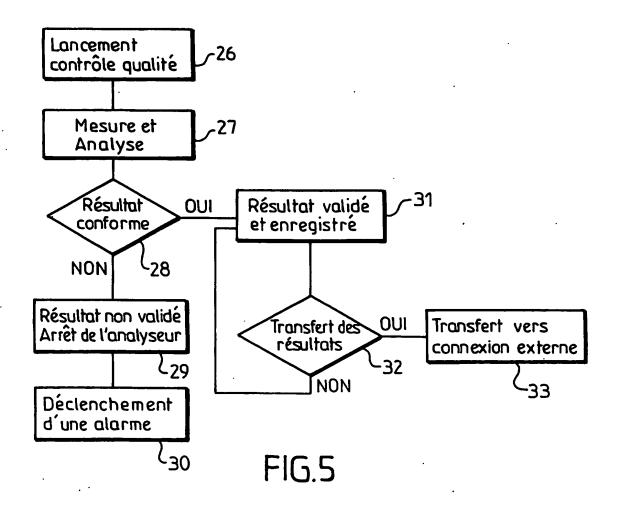

Internal Application No PCT/FR2004/001767

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N35/00 B01F11/00 B01L7/00

According to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G01N B01F B01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Category *		
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 01/36982 A (MAXMAT SA ;CHOJNACKI ANDRE (FR); RANDRIANARIVO JEANET (FR)) 25 May 2001 (2001-05-25)	1-3,5,6, 9-18
A	the whole document	4,7,8
X	US 2003/029254 A1 (HVIDTFELDT KRISTIAN J ET AL) 13 February 2003 (2003-02-13)	1-3,5,6, 9-18
A	abstract; figure 1 paragraph '0085! - paragraph '0091!	4,7,8
X	US 2003/054542 A1 (BURNS RALPH E ET AL) 20 March 2003 (2003-03-20)	1-3,5,6, 9-18
A	abstract paragraph '0093! - paragraph '0138! paragraph '0241! - paragraph '0247!	4,7,8
	-/	
		·

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E* earlier document but published on or after the International filling date L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another clation or other special reason (as specified) O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P* document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	 *T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
6 December 2004	17/12/2004
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bockstahl, F

		PC1/FR2004/0	01/0/
	MION) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Tour-	word to office Ma
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relovant passages	Helev	vant to claim No.
X	US 5 646 046 A (BRAUN PAUL JOSEPH ET AL) 8 July 1997 (1997-07-08) abstract; figures 1-4 column 7, line 3 - line 13 column 8, line 62 - column 9, line 18 column 10, line 39 - line 43 column 10, line 62 - column 11, line 32		1-3,5,6, 9-18
Y	EP 1 174 717 A (ABX SA) 23 January 2002 (2002-01-23)		1-3,5,6, 17,18
A	abstract column 2, line 17 - column 4, line 44		7-16
Y	WO 02/26386 A (AVANTIUM INTERNAT B V; NESBITT GEOFFREY JOHN (NL); WAAL JAN CORNEL) 4 April 2002 (2002-04-04) abstract; figures 1,2 page 7, line 21 - page 9, line 34		1-3,5,6, 17,18
A	EP 0 726 453 A (ABX SA) 14 August 1996 (1996-08-14) abstract; figures 1-3		1-18
A	EP 0 634 660 A (ABX SA) 18 January 1995 (1995-01-18) page 1; figures 1,2		1-18
A	US 5 578 268 A (CHAMPSEIX HENRI ET AL) 26 November 1996 (1996-11-26) abstract; figures 1,9		1-18
A	US 2002/118594 A1 (THOMAS NATHAN ET AL) 29 August 2002 (2002-08-29) cited in the application abstract		1
ı			

ifformation on patent family members

Internal Application No
PCT/FR2004/001767

Patent documen		Publication		Patent family		Publication
cited in search rep	ort	date		member(s)		date
WO 0136982	Α	25-05-2001	FR	2801108	A1	18-05-2001
			AU	2014301	Α	30-05-2001
			EP	1230553	A1	14-08-2002
			WO	0136982	A1	25-05-2001
US 20030292	254 A1	13-02-2003	US	2003126914	A1	10-07-2003
US 20030545	42 A1	20-03-2003	US	2002028489	A1	07-03-2002
		•	US	6335166	B1	01-01-2002
			US	2002098117	A1	25-07-2002
			US	2002137194	A1	26-09-2002
			US	2003027206		06-02-2003
			US	2004115796		17-06-2004
			US	6605213		12-08-2003
			US	2001019826		06-09-2001
			US	2002137197		26-09-2002
			ΑU	765623		25-09-2003
			AU	3772299		23-11-1999
			CA	2328069		11-11-1999
			DE			09-06-2004
			DE Ep	1075328 1075328		11-10-2001 14-02-2001
			JP	2002513936		14-02-2007
			WO	9957561		11-11-1999
US 5646046	A	08-07-1997	US	5236666		17-08-1993
			US	5708591		13-01-1998
			AT	282195		15-11-2004
			AU AU	688365 7566394		12-03-1998
			CA	2168452		14-03-1999 23-02-1999
			EP	0714506		05-06-199
			FI	960682		15-02-199
			JP	3476826		10-12-200
			JP	9502021		25-02-199
			WO	9505590		23-02-199
			AT	154700		15-07-199
			AU	654807		24-11-199
			AU	7168891	Α	26-06-199
			CA	2068413		02-06-199
			DE	69030957		24-07-199
			DE	69030957		20-11-199
			DK	504313		29-12-199
			EP	0504313		23-09-199
			ES	2106774		16-11-199
			FI	922476		29-05-199
			IE	904228		05-06-199
			JP	5503155 0108464		27-05-199
			WO ZA	9108464 9009536		13-06-199 27-11-199
EP 1174717	A	23-01-2002	FR	2812088		25-01-200
			AU	5405801		24-01-200
			BR	0104022		26-02-200
			CA	2353318		21-01-200
			CN	1334453		06-02-200
			EP FI	1174717 20011544		23-01-200 22-01-200

Thiormation on patent family members

Intern al Application No
PCT/FR2004/001767

Patent document ited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP 1174717	A		HU	0102720	A2	29-04-2002
				2002071699		12-03-2002
			NO	20013592		22-01-2002
				2002021983		
						21-02-2002
			ZA 	200105480	A 	17-01-2002
WO 0226386	Α	04-04-2002	AU	1107402		08-04-2002
			EP	1322421		02-07-2003
			WO	0226386	A2	04-04-2002
			US	2004050836	A1	18-03-2004
EP 0726453		14-08-1996	FR	2730315	A1	09-08-1996
			BR	9600549	Α	30-12-1997
			DE	69621361		04-07-2002
			DE	69621361		02-01-2003
			EP	0726453		14-08-1996
			ES	2175045		
						16-11-2002
			HU	9600204		28-07-1997
			JP	8248036		27-09-1996
			US	5665309	Α	09-09-1997
EP 0634660	Α	18-01-1995	FR	2707760	A1	20-01-1995
			AT	175780	T	15-01-1999
			AU	683885	B2	27-11-1997
			AU	6738394		27-01-1999
			CA	2127943		16-01-1999
			DE	69415884		25-02-1999
			DE	69415884		26-08-1999
			EP	0634660		18-01-199
			ES	2127901		01-05-1999
			FI	943361		16-01-199
			HK	1008695	A1	14-04-2000
			JP	7146299	Α	06-06-199!
			NO	942625	Α	16-01-199
			US	5569861	Α	29-10-1990
			ZA	9405141		24-02-199
US 5578268	Α	26-11-1996	FR	2692358	A1	17-12-199
			AT	160631		15-12-199
			AÚ	675228		30-01-199
			AU	4331493		04-01-199
			CA	2137789		23-12-199
			DE	69315433		08-01-199
			DE	69315433		02-07-199
			EP	0645006		29-03-199
			ES	2111750		16-03-199
			FI	945812	Α	09-12-199
			WO	9325885		23-12-199
			JP	3381034		24-02-200
			JP	7507633		24-08-199
			NO ZA	944800 9304091		12-12-199 19-01 - 199
US 2002118594	A1	29-08-2002	NONE			

PCT/FR2004/001767

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 GO1N35/00 BO1F11/00 BO1L7/00

Seton la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 GOIN BOIF BOIL

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquets a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Catégorie *	identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 01/36982 A (MAXMAT SA ;CHOJNACKI ANDRE (FR); RANDRIANARIVO JEANET (FR)) 25 mai 2001 (2001-05-25)	1-3,5,6, 9-18
A	le document en entier	4,7,8
X	US 2003/029254 A1 (HVIDTFELDT KRISTIAN J ET AL) 13 février 2003 (2003-02-13)	1-3,5,6, 9-18
A	abrégé; figure 1 alinéa '0085! – alinéa '0091! ————	4,7,8
X	US 2003/054542 A1 (BURNS RALPH E ET AL) 20 mars 2003 (2003-03-20)	1-3,5,6, 9-18
A	abrégé alinéa '0093! – alinéa '0138! alinéa '0241! – alinéa '0247!	4,7,8
	-/- -	

X Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais	T' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'apparlenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolèment Y' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier &' document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
6 décembre 2004	17/12/2004
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autorisé
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Bockstahl, F

Demai Internationale No PCT/FR2004/001767

DCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertin	ents no. des revendications visées
US 5 646 046 A (BRAUN PAUL JOSEPH ET AL) 8 juillet 1997 (1997-07-08) abrégé; figures 1-4 colonne 7, ligne 3 - ligne 13 colonne 8, ligne 62 - colonne 9, ligne 18 colonne 10, ligne 39 - ligne 43 colonne 10, ligne 62 - colonne 11, ligne 32	1-3,5,6, 9-18
EP 1 174 717 A (ABX SA) 23 janvier 2002 (2002-01-23) abrégé	1-3,5,6, 17,18 7-16
colonne 2, ligne 17 - colonne 4, ligne 44	, 10
WO 02/26386 A (AVANTIUM INTERNAT B V; NESBITT GEOFFREY JOHN (NL); WAAL JAN CORNEL) 4 avril 2002 (2002-04-04) abrégé; figures 1,2 page 7, ligne 21 - page 9, ligne 34	1-3,5,6, 17,18
EP 0 726 453 A (ABX SA) 14 août 1996 (1996-08-14) abrégé; figures 1-3	1-18
EP 0 634 660 A (ABX SA) 18 janvier 1995 (1995-01-18) page 1; figures 1,2	1-18
US 5 578 268 A (CHAMPSEIX HENRI ET AL) 26 novembre 1996 (1996–11–26) abrégé; figures 1,9	1-18
US 2002/118594 A1 (THOMAS NATHAN ET AL) 29 août 2002 (2002-08-29) c1té dans la demande abrégé	1
	8 juillet 1997 (1997-07-08) abrégé; figures 1-4 colonne 7, ligne 3 - ligne 13 colonne 8, ligne 62 - colonne 9, ligne 18 colonne 10, ligne 39 - ligne 43 colonne 10, ligne 62 - colonne 11, ligne 32 EP 1 174 717 A (ABX SA) 23 janvier 2002 (2002-01-23) abrégé colonne 2, ligne 17 - colonne 4, ligne 44 W0 02/26386 A (AVANTIUM INTERNAT B V ;NESBITT GEOFFREY JOHN (NL); WAAL JAN CORNEL) 4 avril 2002 (2002-04-04) abrégé; figures 1,2 page 7, ligne 21 - page 9, ligne 34 EP 0 726 453 A (ABX SA) 14 août 1996 (1996-08-14) abrégé; figures 1-3 EP 0 634 660 A (ABX SA) 18 janvier 1995 (1995-01-18) page 1; figures 1,2 US 5 578 268 A (CHAMPSEIX HENRI ET AL) 26 novembre 1996 (1996-11-26) abrégé; figures 1,9 US 2002/118594 A1 (THOMAS NATHAN ET AL) 29 août 2002 (2002-08-29) cité dans la demande

Renseignements relatife aux membres de familles de brevets

Dema nternationale No PCT/FR2004/001767

Document brevet cité		Date de		Membre(s) de la	Date de
u rapport de recherche		publication		famille de brevet(s)	publication
WO 0136982	Α	25-05-2001	FR	2801108 A1	18-05-2001
			AU	2014301 A	30-05-2001
			EP	1230553 A1	14-08-2002
	-		WO	0136982 A1	25-05-2001
US 2003029254	A1	13-02-2003	US	2003126914 A1	10-07-2003
US 2003054542	A1	20-03-2003	US	2002028489 A1	07-03-2002
			US	6335166 B1	01-01-2002
			US	2002098117 A1	25-07-2002
			US	2002137194 A1	26-09-2002
			US	2003027206 A1	06-02-2003
			US	2004115796 A1	17-06-2004
			US	6605213 B1	12-08-2003
			US	2001019826 A1	06-09-2001
			US	2002137197 A1	26-09-2002
			AU	765623 B2 3772299 A	25-09-2003
			AU Ca	3//2299 A 2328069 A1	23-11-1999 11-11-1999
			DE	29924635 U1	09-06-2004
			DE	1075328 T1	11-10-2001
			EP	1075328 A2	14-02-2001
			ĴΡ	2002513936 T	14-05-2002
			WO	9957561 A2	11-11-1999
US 5646046	 А	08-07-1997	US	5236666 A	17-08-1993
00 00 100 10	•	00 07 1557	ÜS	5708591 A	13-01-1998
			AT	282195 T	15-11-2004
			AU	688365 B2	12-03-1998
			AU	7566394 A	14-03-1995
•			CA	2168452 A1	23-02-1995
			EP	0714506 A1	05-06-1996
			FI	960682 A	15-02-1996
			JP	3476826 B2	10-12-2003
			JP	9502021 T	25-02-1997
			MO	9505590 A1	23-02-1995
			AT	154700 T	15-07-1997
			AU	654807 B2	24-11-1994
			AU	7168891 A	26-06-1991
			CA	2068413 A1	02-06-1991
			DE	69030957 D1	24-07-1997
			DE DK	69030957 T2 504313 T3	20-11-1997 29-12-1997
			EP	0504313 A1	29-12-1997
			ES	2106774 T3	23-09-1992 16-11-1997
			FI	922476 A	29-05-1992
			ΙĒ	904228 A1	05-06-1991
			JP	5503155 T	27-05-1993
			WO	9108464 A1	13-06-1991
			ZA	9009536 A	27-11-1991
EP 1174717	Α	23-01-2002	FR	2812088 A1	25-01-2002
_			AU	5405801 A	24-01-2002
			BR	0104022 A	26-02-2002
			CA	2353318 A1	21-01-2002
			CN	1334453 A	06-02-2002
					06-02-2002 23-01-2002 22-01-2002

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

PCT/FR2004/001767

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la imille de brevet(s)	Date de publication
EP 1174717	Α		HU	0102720 A2	29-04-2002
				2002071699 A	12-03-2002
•			NO	20013592 A	22-01-2002
				2002021983 A1	21-02-2002
			ZA	200105480 A	17-01-2002
				1107400 4	
WO 0226386	A	04-04-2002	AU	1107402 A	08-04-2002
			EP	1322421 A2	02-07-2003
			WO	0226386 A2	04-04-2002
			US 	2004050836 A1	18-03-2004
EP 0726453	Α	14-08-1996	FR	2730315 A1	09-08-1996
			BR	9600549 A	30-12-1997
			DE	69621361 D1	04-07-2002
			DE	69621361 T2	02-01-2003
	•		EP	0726453 A1	14-08-1996
			ES	2175045 T3	16-11-2002
			HÜ	9600204 A2	28-07-1997
			JP	8248036 A	27-09-1996
			ÜS	5665309 A	09-09-1997
EP 0634660	Α	 18-01-1995	FR	2707760 A1	20-01-1995
Er 0034000	^	10-01-1995	AT	175780 T	15-01-1999
			ÂÙ	683885 B2	27-11-1997
			AU	6738394 A	27-01-1995
			CA	2127943 A1	16-01-1995
			DE	69415884 D1	25-02-1999
			DE	69415884 T2	26-08-1999
			EP	0634660 A1	18-01-199!
			ES	2127901 T3	01-05-1999
			FI	943361 A	16-01-199!
			HK	1008695 A1	14-04-2000
			JP	7146299 A	06-06-199
			NO	942625 A	16-01-199
			US	5569861 A	29-10-199
			ZA	9405141 A	24-02-199
US 5578268	Α	26-11-1996	FR	2692358 A1	17-12-199
			AT	160631 T	15-12-199
			AU	675228 B2	30-01-199
			AU	4331493 A	04-01-199
			CA	2137789 A1	23-12-199
			DE	69315433 D1	08-01-199
			DE	69315433 T2	02-07-199
			EP	0645006 A1	29-03-199
			ĒS	2111750 T3	16-03-199
			FΙ	945812 A	09-12-199
			wô	9325885 A1	23-12-199
			JP	3381034 B2	24-02-200
			JP	7507633 T	24-08-199
				944800 A	12-12-199
			NO ZA	944800 A 9304091 A	12-12-199
NC 0000110501					
US 2002118594	A1	29-08-2002	AUCU	N	